



崩解度测试仪

ZT 730

www.erweka.com/cn/products/physical-testers/disintegration-testers/zt-730/

ZT 730

崩解度测试仪

ERWEKA ZT 730 系列带无线束 AirBasket，通过使用独特的磁铁和传感器系统自动确定样品的崩解时间。ZT 730 可配备一个（ZT 731）或两个（ZT 732）单独驱动测试站，并配备集成的流通加热器。

其新设计的无线 AirBasket 使崩解测试尽可能简单和快速的自动确定崩解时间。它的电子腔室是密封的，因此可以用洗碗机清洗。它的传感器也非常耐用，使 AirBasket 能够在酸性介质中使用。AirBasket 有 A 型篮子，带有 6 个试管，用于标准片剂，B 型篮子，有 3 个试管，用于更大的片剂（根据 USP/EP/JP 标准 >><<）。其温度传感器 PT 100 允许对水浴温度进行持续控制。ZT 730 系列通过直观的 7 英寸触摸屏进行控制，能够存储和检索多达 200 种产品/方法以及结果和参数

**ZT 730 WITH AIRBASKET INTRODUCTION**

产品视频

播放视频 →

www.erweka.com/files/435167/zt-730-with-airbasket-introduction.mp4

新一代崩解测试

主要功能

| 触摸显示屏

用户友好的菜单结构使操作直观便捷。

| AIRBASKET

新设计的无线束 AirBasket 使自动确定崩解时间的崩解试验变得尽可能简单快捷。

| 测试站

适用于单站或双站操作。

| 两种篮子类型

提供 A 型和 B 型篮。

ZT 730

AIRBASKET



配备一至两个带 AirBasket 的测试站 - ZT 730 可以配置一个或两个带 AirBasket 的测试站。AirBasket 无需电缆，可在几秒钟内完成安装，有 A 型或 B 型可供选择。


| ZT 731 带 1 个测试站

| ZT 732 带 2 个测试站

| AirBaskets A 型和 B 型可供选择

ZT 730

7 英寸触摸显示屏

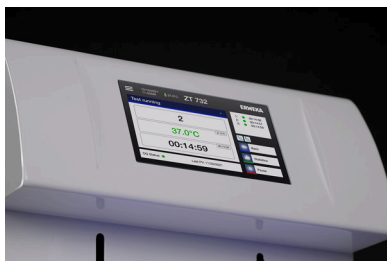

借助直观的触摸界面，可以快速有效地使用带有 AirBasket 的 ZT 730。它提供产品和结果的记忆功能，支持用户管理和存储测试结果。

还能够显示传感器检测到整片药片完全崩解后，每个单独测试位置的崩解时间。

ZT 730


可靠的水浴技术



可靠的水浴技术利用了水的热惰性。由于水温相当稳定，因此带有 AirBasket 的 ZT 730 系列的水浴可以保持稳定温度。水浴还有另一个优点 - 它可以保持设备的低重心并防止倾倒。

在几秒钟内即可进行测试

4个步骤：

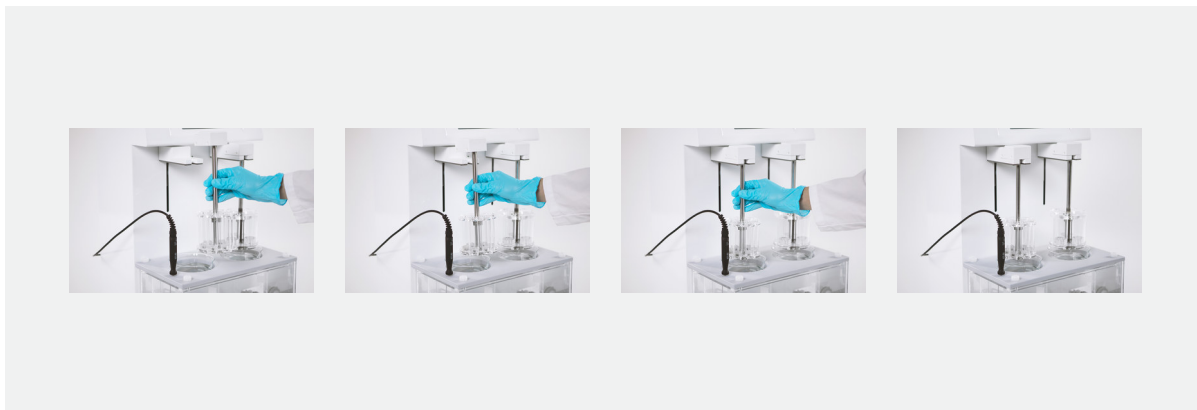

ZT 730

选项

ZT 730 可提供不同的选项。

- | AirBasket A型（6个试管）和 B 型（3个试管）
- | 打印机
- | 用于预热的附加容器（仅限 ZT 731）
- | IQ/OQ/PV 文档
- | 用于从篮筐中取出A型挡板的挡板取出器
- | 适用于 AirBasket A 型和 B型的 40 目筛网
- | IQ/OQ/PV 验证服务

ZT 730

技术参数

重量	30 - 35 kg
Dimensions (H x W x D)	667×397×365毫米
电压	230伏/115伏/1750瓦；50-60赫兹
接口	USB A、USB B和LAN
测试站	1(ZT 731)或2(ZT 732)
控制	7 英寸触摸显示屏
行程高度	55±2毫米
行程速度	30±1行程/分钟
供暖	集成直通加热系统(精度±0.2 °C)
温度控制	External PT 100 temperature sensor
内存	4 GB memory for 200 products/methods and approx. 10 000 test results
升降驱动	步进电机
自动测定崩解时间	AirBasket type A (6 test tubes) or AirBasket type B (3 test tubes plus discs)

ZT 730

资料下载

中文产品数据表 →

www.erweka.com/files/462561/chan-pin-shu-ju-biaozt-730-series.pdf

ZT 730 产品手册 (英语) →

www.erweka.com/files/435475/zt-730.pdf

ZT 730

联系我们

www.erweka.com/cn/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=ER-P-DT-21

报价详情

www.erweka.com/cn/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=ER-P-DT-21

CONFIGURE YOUR SYSTEM

configurator.erweka.com/#/product/zt



ERWEKA
a **VERDER** company

www.erweka.com/cn/products/physical-testers/disintegration-testers/zt-730/

© ERWEKA – www.erweka.com / Content may be subject to modifications or corrections