


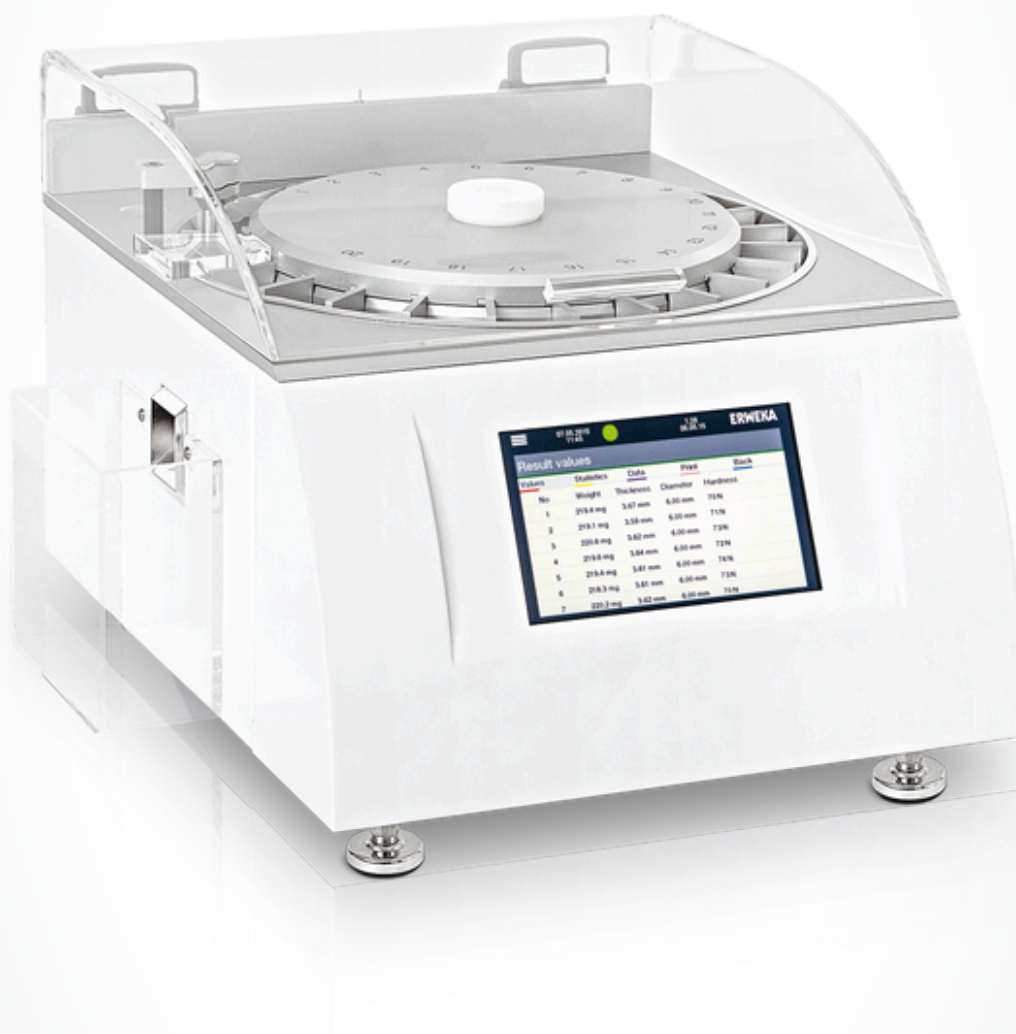

TESTEUR DE RÉSISTANCE À LA RUPTURE

EASYCHECK

www.erweka.com/fr/produits/testeur-physique/testeur-de-durete-des-comprimes/easycheck/


EASYCHECK

TESTEUR DE RÉSISTANCE À LA RUPTURE

L'EasyCheck est le nouvel appareil d'entrée de gamme pour les tests combinés de comprimés entièrement automatisés jusqu'à 5 paramètres.

L'appareil de test combiné compact et conforme à 100 % à toutes les pharmacopées courantes convainc avant tout par l'accent clairement mis sur les fonctions de mesure les plus importantes et ses innovations techniques : La cellule de pesée intégrée permet de peser automatiquement les échantillons, l'Oblong Slider® aligne automatiquement les Oblongs de forme régulière et l'écran tactile intuitif permet une utilisation confortable de l'appareil, qui dispose de possibilités de stockage pour 100 produits/méthodes. En outre, l'EasyCheck offre, outre une mémoire de test pour 1 million de résultats de test directement sur l'appareil, un Audit Trail Light conforme à la norme 21 CFR Part 11 et une exportation des données aux formats CSV et XML.

L'EasyCheck est l'appareil d'entrée de gamme simple pour le test entièrement automatique et précis de jusqu'à 5 paramètres !

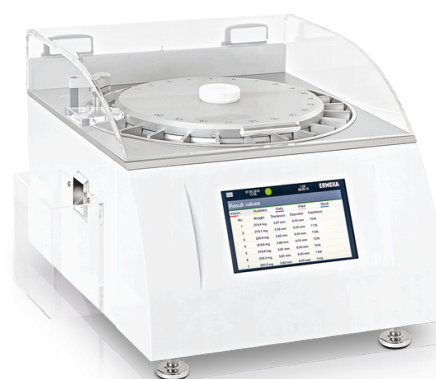
ERWEKA

Tablet combination tester

EasyCheck

 Easy and fully automatic testing
of up to 5 parameters


EASYCHECK EN ACTION

EasyCheck - Fully automated, entry-level 5-parameter physical tester

LIRE LA VIDÉO →

www.erweka.com/files/435146/easycheck-fully-automated-entry-level-5-parameter-physical-tester.mp4

EASYCHECK

PRÉSENTATION

**MESURE DE POIDS INTÉGRÉE !**

Une cellule de charge intégrée détermine automatiquement le poids des comprimés avec une précision maximale et l'attribue à des échantillons individuels.

**OBLONG SLIDER®**

La technique de coulisement permet d'aligner de manière optimale des oblongs de forme régulière et donc de contrôler sans effort leur largeur, leur longueur et leur résistance à la rupture.

**MÉMOIRE DE TEST, AUDIT TRAIL & EXPORTATION DE DONNÉES**

Stockage facultatif pour jusqu'à 1 million de résultats de tests et exportation via LAN aux formats CSV ou XML – Connexion logicielle MC.NET facultative fournissant un Audit Trail et assurant la conformité à la partie 11 du CFR.

**MAGASIN ROTATIF EN FORME D'ÉTOILE**

Le magasin en étoile, clairement agencé, est fabriqué en acier inoxydable et en aluminium. Il est équipé de 20 points de test pour les échantillons à tester et permet à tout moment un contrôle visuel sans problème des processus de test.

EASYCHECK

COMMANDE INTUITIVE

FONCTIONNALITÉ ÉTENDUE

Lors du développement de l'écran tactile EasyCheck, nous nous sommes concentrés sur ce qui est le plus important pour nos utilisateurs : la création, le lancement et la documentation rapides et simples des tests. L'écran tactile couleur intuitif permet de mesurer facilement et d'utiliser toutes les fonctions complexes. Il est possible de lancer et d'afficher les mesures rapidement et facilement sur l'appareil, et la nouvelle compatibilité avec les claviers USB simplifie encore plus la gestion de toutes les données directement sur l'appareil.



ENREGISTREMENT DES RÉSULTATS DE TESTS

EasyCheck enregistre en standard 100 produits/méthodes avec jusqu'à 1 million de résultats de test, pouvant être rappelés à tout moment selon les besoins.

Des fonctions d'étalonnage étendues et la fonction Audit Trail Light (documente les modifications avec Quoi ?, Qui ? et Quand ?) permettent une documentation précise de toutes les étapes de travail - un confort d'utilisation maximal combiné à des fonctions utiles.

EASYCHECK

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- | Poids
- | Diamètre/longueur
- | Test de dureté
- | Épaisseur
- | Largeur


OUTIL D'ÉTALONNAGE

AUTOCAL 2.0

Le système ERWEKA AutoCal 2.0 est un outil d'étalonnage qui permet d'étalonner automatiquement la station d'essai de dureté sans avoir besoin de poids, d'un PC externe et d'un logiciel.

L'étalonnage n'a jamais été aussi simple. La clé USB AutoCal 2.0 est connectée au TBH x25 via l'interface USB et la cellule de pesée certifiée connectée est insérée dans la station d'essai de dureté.

L'ensemble du système (ajustement et étalonnage) est désormais contrôlé à l'aide du clavier et de l'écran du testeur de dureté. L'appareil effectue des ajustements automatiques et il est possible de contrôler l'étalonnage en vérifiant jusqu'à trois points dans la plage de mesure pour détecter les écarts de linéarité. De plus, il est facile de générer un rapport de documentation via l'interface d'impression standard.

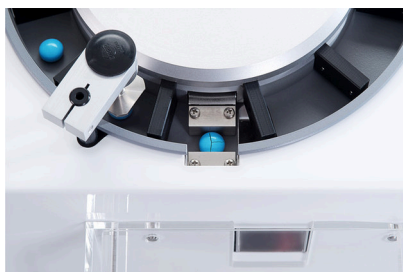

Outil d'étalonnage AutoCal 2.0.

EASYCHECK

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids	30 kg
Dimensions (H x W x D)	321 (646 mm avec couvercle acrylique ouvert) x 360 (422 mm avec récipient de collecte) x 467 mm
Voltage	100 - 240 V / 50-60 hz / 150 W
Interfaces	USB A pour imprimante, USB B pour PC, LAN (Ethernet - RJ45), slot pour carte SD
Control	7" écran tactile, avec prise en charge des claviers USB
Plage de mesure: Dureté	3 - 500 N (± 1 N) (facultatif 3 - 1000 N)
Plage de mesure: Diamètre / Longueur	2 à 26 mm ($\pm 0,05$ mm)
Plage de mesure: Épaisseur	Potentiomètre linéaire 2 - 10 mm ($\pm 0,05$ mm)
Plage de mesure: Poids	Cellule de pesée Sartorius intégrée 15,0 mg - 89 g ($\pm 0,0001$ g)
Plage de mesure: Largeur	2 à 10 mm ($\pm 0,05$ mm)
Principe de mesure: Vitesse constante	0.05 - 3.00 mm / sec
Principe de mesure: Force constante	10 - 100 N / sec

EASYCHECK

TÉLÉCHARGEMENTS

FICHE PRODUIT EASYCHECK →

www.erweka.com/files/462572/fiche-produit-easycheck.pdf

PHYSICAL TESTERS GUIDE (ANGLAIS) →

www.erweka.com/files/435505/physical-testers-guide.pdf

TABLET TEST EQUIPMENT OVERVIEW (ANGLAIS)

→

www.erweka.com/files/435493/tablet-test-equipment-overview.pdf

EASYCHECK (ANGLAIS) →

www.erweka.com/files/435454/easycheck.pdf

TABLET HARDNESS TESTERS (ANGLAIS) →

www.erweka.com/files/435525/tablet-hardness-testers.pdf

EASYCHECK

NOUS CONTACTER

www.erweka.com/fr/contact-services/contact-form/

prefilltext=contact_form.request&product=ER-P-TH-01

DEMANDE DE DEVIS

www.erweka.com/fr/contact-services/contact-form/

prefilltext=contact_form.quote_request&product=ER-P-TH-01



ERWEKA
a **VERDER** company

www.erweka.com/fr/produits/testeur-physique/testeur-de-durete-des-comprimes/easycheck/

© ERWEKA – www.erweka.com / Le contenu peut faire l'objet de modifications ou de corrections