



SOFTWARE PARA EL ANALIZADOR DE DISOLUCIÓN

DISO.NET 4

www.erweka.com/es/productos/analizadores-de-disolucion/software-para-el-analizador-de-disolucion/disso-net-4/

DISSO.NET 4

SOFTWARE PARA EL ANALIZADOR DE DISOLUCIÓN

Dado que satisface el código CFR, título 21, parte 11, el software Disso.NET 4 de ERWEKA es el complemento perfecto para todos nuestros sistemas de disolución: desde los sistemas de disolución offline, pasando por los sistemas mixtos online/offline, hasta el sistema completamente automatizado RoboDis II+.

El software le facilita los procesos de disolución estándar, se encarga sin problemas de las tareas de evaluación y controla todas y cada una de las funciones y los dispositivos conectados (como el analizador de disolución con espectrofotómetro UV-Vis). Al finalizar estos ensayos, Disso.NET genera informes integrales con los logotipos corporativos para exportarlos en un archivo PDF o exportar los resultados en formato XLS o XML.

Nuestro amplio registro de auditoría Audit Trail –conforme al código actualizado CFR, título 21, parte 11– documenta minuciosamente todos los cambios realizados en el sistema (qué, quién, cuándo y por qué); además se puede buscar y filtrar fácilmente gracias al visor que integra esta función de registro.

Disso.NET 4 se conecta al directorio Active Directory. De esta forma se comparten los datos de inicio de sesión y las contraseñas de usuario entre sistemas, así se garantiza un manejo sencillo y se evita el tener que contar con un sinnúmero de contraseñas.



DISSO.NET 4

CARÁCTERÍSTICAS PRINCIPALES



GESTIÓN SENCILLA DE LOS DATOS

Con Disso.NET 4 es posible gestionar fácilmente usuarios, métodos, informes y mucho más. La compatibilidad de varios usuarios con diferentes funciones de usuario (como operador, operador principal, administrador; todas configurables) permite tener un control preciso de acceso al sistema y a los datos, incluso se puede configurar con permisos individuales. El cierre de sesión automático completa las funciones de seguridad de acceso y garantiza que solo acceda el personal autorizado.

DOCUMENTACIÓN E INFORMES

Disso.NET 4 documenta los ensayos de manera íntegra: con solo pulsar un botón los clientes generan fácilmente documentos con logotipos personalizados, desde informes de análisis resumidos hasta datos de los métodos, datos de calibración o datos sin procesar. El flujo de trabajo integrado facilita la aprobación y revisión antes de publicar los informes en el laboratorio digital.

COMPATIBILIDAD DE IDIOMA

El software Disso.NET 4 para los analizadores de disolución ya cuenta con su versión en inglés y alemán. Se pueden añadir más idiomas de manera sencilla mediante los archivos de idioma.

BASE DE DATOS CON RESTAURACIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Nuestra base de datos MS SQL, fiable y de uso habitual en el sector, almacena fácilmente toda la información desde métodos hasta usuarios, pasando por datos de medición UV-Vis, informes y datos sin procesar. Además, las funciones de restauración y copia de seguridad de MS SQL fáciles de usar garantizan una mejor integridad y evitan la pérdida de datos.


IDEONEIDAD DEL SISTEMA Y FUNCIÓN MULTITAREA

Las pruebas constantes de idoneidad del sistema garantizan la máxima fiabilidad al comprobar el sistema de manera regular. Gracias al principio «JobController» aplicado se realizan múltiples tareas con facilidad durante los ensayos.

DESDE NUESTROS ANALIZADORES DE DISOLUCIÓN HASTA EL ROBODIS II


CONTROL TOTAL DE TODOS NUESTROS SISTEMAS

Disso.NET 4 permite controlar todos nuestros sistemas de disolución. Disso.NET 4 controla los sistemas de disolución online/offline más sencillos, los sistemas de disolución online/offline y análisis por HPLC que son más complejos y el dispositivo RoboDis II+. Todo ello reduciendo el nivel de complejidad de estos instrumentos y sistemas a unas cuantas pantallas intuitivas, aportando un enfoque lógico de principio a fin.

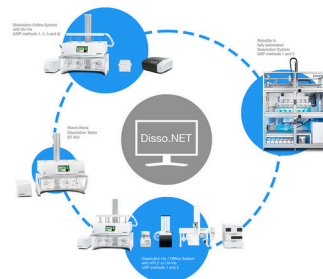

CONFORME AL CÓDIGO CFR, TÍTULO 21, PARTE 11

REGISTRO DE AUDITORÍA AUDIT TRAIL

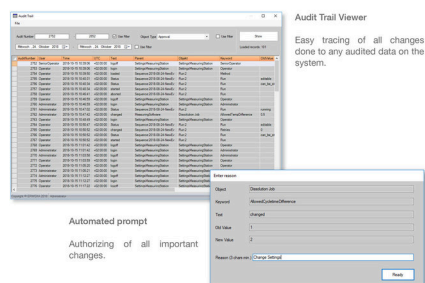


Disso.NET 4 cuenta con un registro de auditoría completo, el Audit Trail, que supervisa todos los cambios en el sistema (qué, quién, cuándo y por qué). Siempre que un usuario autorizado aplique cambios a los datos del sistema que deban supervisarse, aparece un mensaje de este registro que obliga al usuario a introducir un motivo para justificar este cambio. Cada vez que se crean datos desde cero (p. ej., un método nuevo), el sistema evalúa automáticamente esta entrada de auditoría y añade de forma automática un motivo (p. ej., «creado»).

Todos los datos de auditoría se pueden buscar y filtrar cómodamente con nuestro nuevo visor del Audit Trail, así se hace un seguimiento fácil en cualquier cambio del sistema con un número de auditoría consecutivo. Esta nueva función cumple al 100 % las últimas normas de regulación.

MÓDULOS POTENTES

EDITOR DE DISSO.NET

Disso.NET 4 cuenta con un registro de auditoría completo, el Audit Trail, que supervisa todos los cambios en el sistema (qué, quién, cuándo y por qué). Siempre que un usuario autorizado aplique cambios a los datos del sistema que deban supervisarse, aparece un mensaje de este registro que obliga al usuario a introducir un motivo para justificar este cambio. Cada vez que se crean datos desde cero (p. ej., un método nuevo), el sistema evalúa automáticamente esta entrada de auditoría y añade de forma automática un motivo (p. ej., «creado»).

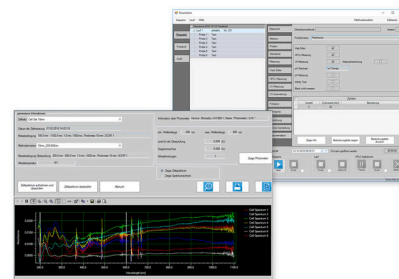

Todos los datos de auditoría se pueden buscar y filtrar cómodamente con nuestro nuevo visor del Audit Trail, así se hace un seguimiento fácil en cualquier cambio del sistema con un número de auditoría consecutivo. Esta nueva función cumple al 100 % las últimas normas de regulación.

DISSO.NET 4

DESCARGAS

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO DISSONET 4 → www.erweka.com/files/462628/hoja-de-datos-del-producto-dissonet-4.pdf

DISSO.NET 4 → www.erweka.com/files/435528/disso-net-4.pdf (inglés)

DISSOLUTION GUIDE → www.erweka.com/files/435533/dissolution-guide.pdf (inglés)

TABLET TEST EQUIPMENT OVERVIEW → www.erweka.com/files/435493/tablet-test-equipment-overview.pdf (inglés)

ERWEKA DISSOLUTION SYSTEM WITH HPLC (ANIMATION) → www.erweka.com/files/461854/erweka-dissolution-system-with-hplc-animation.mp4 (inglés)

DISSO.NET 4

CONTACTO

www.erweka.com/es/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=ER-D-SO-01

PEDIR UN PRESUPUESTO

www.erweka.com/es/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=ER-D-SO-01



ERWEKA
a **VERDER** company

www.erweka.com/es/productos/analizadores-de-disolucion/software-para-el-analizador-de-disolucion/disso-net-4/

© ERWEKA GmbH – www.erweka.com / El contenido puede estar sujeto a modificaciones o correcciones