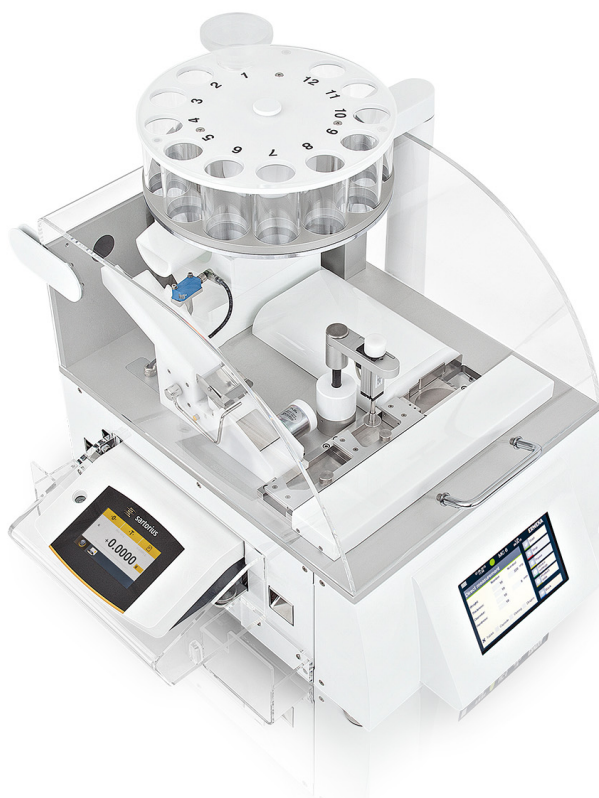




BRUCHFESTIGKEITSTESTER

MULTICHECK 6

www.erweka.com/de/produkte/physikalische-tester/tablettenhaerteproefer-bruchfestigkeitstester/multicheck-6/

MULTICHECK 6

BRUCHFESTIGKEITSTESTER

Der MultiCheck 6 bietet für seine Nutzer eine leichtere Bedienweise, höhere Effizienz und noch mehr Komfort.

Dieses vollautomatische Kombinationstestgerät besteht vor allem durch seine vielen technischen Innovationen: Das intuitive Touch-Display mit integrierter MC.NET Softwarefunktionalität, die Kapselgewichtsmessung und der patentierte Oblong Navigator® sind nur einige der Neuerungen. Zudem ist der MultiCheck 6 der leiseste und sauberste seiner Art.

Bewährte Eigenschaften wurden weiterhin beibehalten: Der MultiCheck 6 testet bis zu fünf Parameter von Tabletten, vollautomatisch und 100 % konform mit allen gängigen Pharmakopöen: Ein flüsterleiser Alleskönner.



Kapselgewichtsmessung



Integriertes Touch-Display



Oblong Navigator®

DIE NEUE GENERATION DES MULTICHECK

HAUPTFUNKTIONEN

KAPSELGEWICHTSMESSUNG

Dank der Leerkapselmessung ist der MultiCheck 6 in der Lage, das Gewicht von Kapseln zu ermitteln. Dafür wird das Leerkapselgewicht automatisch von dem Gewicht der gefüllten Kapseln abgezogen. Durch den direkten Auswurf nach der Gewichtsmessung findet der Messungsprozess sehr schnell statt.

TOUCH-DISPLAY

Das komfortable Touch-Display ermöglicht die intuitive Bedienung des Gerätes.

OBLONG NAVIGATOR®

Mit der patentierten Drehtellertechnik können ungewöhnlich geformte Oblongs und Tabletten korrekt ausgerichtet und damit problemlos auf Breite, Länge und Bruchfestigkeit hin überprüft werden.

DIREKTMESSUNG

Über das Direktmessmenü können Tests sehr schnell gestartet und Ergebnisse abgespeichert werden.

MULTICHECK 6

DAS MULTICHECK 6 TOUCH-DISPLAY

INTUITIVE BEDIENUNG – BREITE FUNKTIONALITÄT

Bei der Entwicklung des MultiCheck 6 Touch-Displays haben wir uns auf das konzentriert, was für unsere Nutzer am wichtigsten ist: Schnell und unkompliziert Tests anlegen, starten und dokumentieren. Das intuitive Touch-Display ermöglicht die einfache Bedienung aller komplexen Funktionen. Dank integrierter MC.NET Softwarefunktionen können die Messungen direkt am Gerät gestartet und angezeigt werden.

SPEICHERN VON TESTERGEBNISSEN

Der MultiCheck 6 speichert standardmässig 100 Produkte/Methoden mit bis zu 1 Million Testergebnissen, die jederzeit aufgerufen werden können.

Umfangreiche Kalibrierungsfunktionen und das Audit Trail Light Feature (dokumentiert Änderungen mit Was?, Wer? und Wann?) erlauben eine genaue Dokumentation aller Arbeitsschritte – höchster Nutzerkomfort kombiniert mit mächtigen Funktionen.



MULTICHECK 6

TESTEN VON BIS ZU 5 PARAMETERN FÜR ALLE ARTEN VON TABLETTEN

GEWICHT

DICKE

DURCHMESSER /
LÄNGE

BREITE

HÄRTETESTEN

KALIBRIERWERKZEUG

AUTOCAL 2.0

Das ERWEKA AutoCal 2.0 System ist ein Kalibrierwerkzeug zur automatischen Kalibrierung der Härteprüfstation, ohne dass es hierfür Gewichte, eines externen PCs und einer Software bedarf.

Kalibrierung ist so einfach wie nie geworden. Der AutoCal 2.0 USB-Stick wird über die USB-Schnittstelle an den TBH x25 angeschlossen und die verbundene zertifizierte Wägezelle in die Härteprüfstation eingesetzt.

Das gesamte System (Anpassung und Kalibrierung) wird nun mit Hilfe der Tastatur und des Displays des Härte testers gesteuert. Das Gerät führt automatische Anpassungen durch und die Kalibrierung kann durch das Prüfen von bis zu drei Punkten innerhalb des Messbereiches auf Linearitätsabweichungen kontrolliert werden. Zudem lässt sich über die Standard Drucker-Schnittstelle leicht ein Dokumentationsbericht generieren.



MULTICHECK 6

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	50 kg
Dimensions (H x W x D)	613 x 627 x 643 mm
Voltage	100 - 240 V / 50-60 HZ
Schnittstellen	LAN, USB A, USB B und SD-Kartensteckplatz
Steuerung	7" Touch-Display, Auflösung 800 x 400 Pixel
Messbereich: Härte	3 - 500 N (± 1 N)
Messbereich: Durchmesser / Länge	2 - 23 mm ($\pm 0,05$ mm) / 2 - 28 mm ($\pm 0,05$ mm)
Messbereich: Dicke	2 - 10 mm ($\pm 0,05$ mm)
Messbereich: Gewicht	20,0 mg - 120 g ($\pm 0,0001$ g)
Messbereich: Breite	2 - 15 mm ($\pm 0,05$ mm)
Messprinzip: Konstante Geschwindigkeit	0.05 - 3.0 mm / sec
Messprinzip: Konstante Kraft	10 - 100 N / sec
Compliance MC.NET	21 CFR Part 11

MULTICHECK 6

DOWNLOADS

MULTICHECK 6 BROSCHÜRE →

erweka.com/files/474646/multicheck-6.pdf

**TABLET TEST EQUIPMENT OVERVIEW
(DEUTSCH) →**

erweka.com/files/444479/tablet-test-equipment-overview.pdf

TABLET HARDNESS TESTERS (ENGLISCH) →

erweka.com/files/435525/tablet-hardness-testers.pdf

PRODUKTDATENBLATT MULTICHECK 6 →

erweka.com/files/462517/produkt-datenblatt-multicheck-6.pdf

PHYSICAL TESTERS GUIDE (ENGLISCH) →

erweka.com/files/435505/physical-testers-guide.pdf

MULTICHECK 6 ANIMATION (ENGLISCH) →

erweka.com/files/435177/multicheck-6-animation.mp4

MULTICHECK 6

KONTAKT

erweka.com/de/contact-services/contact-form/

ANGEBOTSANFRAGE

erweka.com/de/contact-services/contact-form/



ERWEKA
a **VERDER** company

www.erweka.com/de/produkte/physikalische-tester/tablettenhaartepreuefer-bruchfestigkeitstester/multicheck-6/

© ERWEKA – www.erweka.com / Content may be subject to modifications or corrections