



DIGITALER DISSOLUTION TESTER

DT LIGHT SERIE

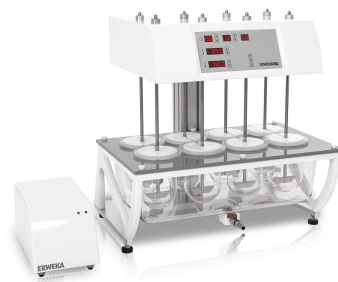
www.erweka.com/de/produkte/dissolution-tester/usp-1-2-5-6-einzelgeraete/dt-light/

DT LIGHT SERIE

DIGITALER DISSOLUTION TESTER

Solide ausgestattet, kompakt und in bewährter ERWEKA-Qualität: Die manuellen Dissolutiontester aus der ERWEKA DT light Serie.

Durchdacht konfiguriert testen die ERWEKA light Geräte in der Standardversion nach USP Methode 2 (Paddle) und sind dank ERWEKA-Zubehör leicht auf Methode 1, 5 und 6 erweiterbar. Die sechs oder acht Teststationen sind mit einem festen Antriebskopf versehen, der einen einfachen Zugriff auf die 1000 ml-Prüfbehälter zur manuellen Probennahme ermöglicht. Zur Grundausstattung gehören ebenso die Abdeckungen zur Reduzierung der Verdunstung, die Zentrierringe für die Stäbe sowie die Distanzbälle zur Einstellung der Paddle-Höhe. Kompakte Einstiegsgeräte zum besten Preis.

**DT 126 LIGHT**

Das perfekte Einstiegsgerät unter den Dissolution Testern.

- | Maße (Breite / Tiefe / Höhe): 510 mm / 450 mm / 660 mm
- | Gewicht: 30 kg

**DT 128 LIGHT**

Dissolution Testen mit bis zu 8 Teststationen.

- | High-head with 8 test stations
- | Maße (Breite / Tiefe / Höhe): 510 mm / 450 mm / 660 mm
- | Gewicht: 30 kg

EINFACHER START IN DIE WELT DES DISSOLUTION TESTENS.

PRODUKTHIGHLIGHTS



100 % USP/EP/JP KONFORM

Der High-Head Modus bietet einen unkomplizierten Zugriff auf die Prüfbehälter und vereinfacht so die manuelle Probenentnahme.



HIGH-HEAD MODUS

Externe Durchflussheizung reduziert Vibrationen und sorgt für eine gleichbleibende Temperatur.



USP METHODE 2

Im Lieferumfang enthalten: Stäbe mit Paddels für USP Prüfmethode 2.



EINFACHE REINIGUNG

Einfaches Reinigen des Wasserbades und der Aufstellfläche.



EXTERNE HEIZUNG

Der High-Head Modus bietet einen unkomplizierten Zugriff auf die Prüfbehälter und vereinfacht so die manuelle Probenentnahme.



EINFACHE BEDIENUNG

Einfache Bedienung mit Symboltasten und LED-Display zur Anzeige von Temperatur, Umdrehung pro Minute und Laufzeit.

DT LIGHT SERIE

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	30 kg (DT 126 Light) 38 kg (DT128 Light)
Dimensions (H x W x D)	660 x 510 x 450 mm (DT 126 Light) 680 x 642 x 482 mm (DT128 Light)
Teststationen	6 in 2 rows (DT 126 Light) 8 in 2 rows (DT 128 Light)
Probenahmepositionen	Hochkopf
USP-Verfahren	USP 1 / USP 2 / USP 5 / USP 6
Temperatur	30 - 50 °C (± 0,2 °C)
Geschwindigkeit	20 - 250 rpm
Schnittstellen	1x RS-232, 2x USB

DT LIGHT SERIE

KONTAKT →

erweka.com/de/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=ER-D-S1-21

ANGEBOTSANFRAGE →

erweka.com/de/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=ER-D-S1-21

DT LIGHT SERIE PDF →

erweka.com/files/449133/dt-light-serie.pdf

PRODUKTDATENBLATT →

erweka.com/files/462571/produkt-datenblatt-dt-light.pdf



ERWEKA
a **VERDER** company

www.erweka.com

www.erweka.com/de/produkte/dissolution-tester/usp-1-2-5-6-einzelgeraete/dt-light/