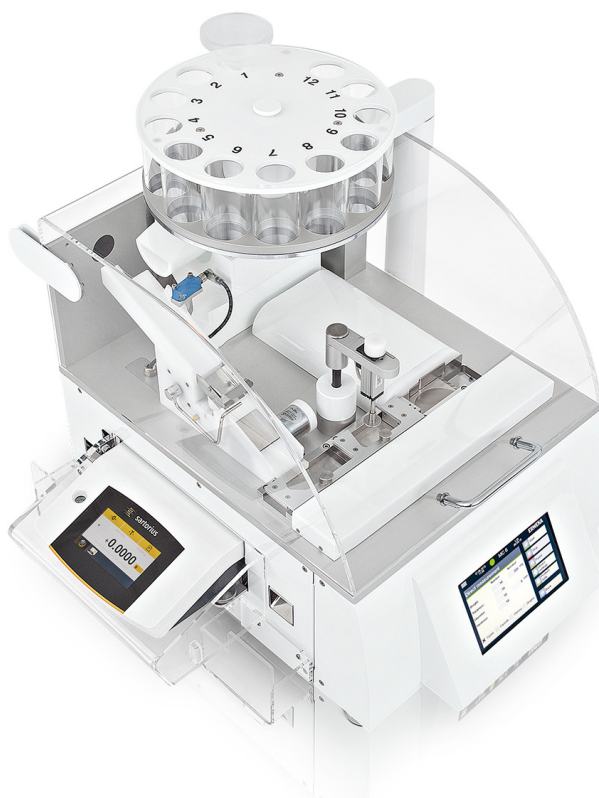




DURÓMETRO DE COMPRIMIDOS

MULTICHECK 6

www.erweka.com/es/productos/analizadores-fisicos/durometro-de-comprimidos/multicheck-6/

MULTICHECK 6

DURÓMETRO DE COMPRIMIDOS

El MultiCheck 6 conjuga la máxima eficacia con una mayor comodidad para el usuario.

Este analizador combinado totalmente automático está equipado con tecnología innovadora: una pantalla táctil intuitiva con funciones integradas del software MC.NET, un sistema de medición del peso de las cápsulas y el rotador patentado Oblong Navigator® son solo algunas de las muchas prestaciones. Además, el MultiCheck 6 ofrece un nivel de ruido insuperable y el funcionamiento más limpio de su clase.

Se han mantenido las prestaciones demostradas: el MultiCheck 6 puede analizar hasta cinco parámetros de comprimidos, está completamente automatizado y se ajusta al 100 % a todas las farmacopeas del mundo. Es un instrumento todoterreno.



Medición del peso de la cápsula



Pantalla táctil integrada



Rotador Oblong Navigator®

MULTICHECK DE ÚLTIMA GENERACIÓN

CARÁCTERÍSTICAS PRINCIPALES

MEDICIÓN DEL PESO DE LA CÁPSULA

Con su sistema de medición del peso de las cápsulas vacías, el MultiCheck 6 determina el peso de las cápsulas y resta automáticamente el peso de las cápsulas vacías al peso de las cápsulas llenas. La expulsión directa justo después de medir el peso acelera el proceso de medición.

PANTALLA TÁCTIL

La pantalla táctil intuitiva hace que el dispositivo sea fácil de manejar.

ROTADOR OBLONG NAVIGATOR®

Con la tecnología patentada de plataforma rotatoria, los comprimidos oblongos y con formas irregulares se pueden alinear correctamente y verificar su diámetro, anchura y longitud a la perfección.

MEDICIÓN DIRECTA

Con el menú de medición directa, los ensayos se inician rápidamente y los resultados se guardan de inmediato.

MULTICHECK 6

PANTALLA TÁCTIL DEL MULTICHECK 6

FÁCIL DE USAR: MÁS PRESTACIONES

Al desarrollar la pantalla táctil del MultiCheck 6 nos centramos en las funciones más útiles para el usuario: creación sencilla y rápida de los métodos, inicio de las pruebas y documentación de los resultados de los ensayos. La pantalla táctil intuitiva facilita el manejo de las funciones disponibles. Gracias a las funciones integradas del software MC.NET, es posible iniciar las mediciones y visualizar los resultados directamente en el instrumento.

**ALMACENAMIENTO DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS**

El dispositivo guarda por defecto 100 productos o métodos y tiene una memoria de productos de hasta 1 millón de resultados, así se pueden recuperar en cualquier momento los resultados de los ensayos anteriores.

Además, las amplias funciones de calibración integradas y la función Audit Trail Light (registro claro de qué, quién y cuándo) garantizan que siempre tenga acceso a resultados precisos de los ensayos y a una documentación exhaustiva de todos los pasos de trabajo: máxima facilidad de uso combinada con unas potentes prestaciones.

MULTICHECK 6

ENSAYOS DE HASTA 5 PARÁMETROS PARA TODO TIPO DE COMPRIMIDOS

PESO

ESPESOR

DIÁMETRO Y
LONGITUD

ANCHURA

ENSAYOS DE
DUREZA

HERRAMIENTA DE CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA

AUTOCAL 2.0

El sistema AutoCal 2.0 de ERWEKA es una herramienta de calibración para calibrar el durómetro automáticamente, sin pesas, ordenador externo ni software.

La calibración nunca había sido tan sencilla: la memoria USB del AutoCal 2.0 se conecta al puerto USB del TBH x25, mientras que la celda de carga homologada y conectada se inserta en la estación del ensayo de dureza.

Todo el sistema (ajuste y calibración) ahora se maneja a través del teclado y la pantalla del durómetro. El instrumento realiza el ajuste automáticamente y se puede comprobar la linealidad de la calibración revisando hasta tres puntos del intervalo de medición. Además, es posible generar un documento de informe a través de la interfaz de la impresora estándar.



MULTICHECK 6

DATOS TÉCNICOS

Peso	50 kg
Dimensions (H x W x D)	613 x 627 x 643 mm
Voltage	100 - 240 V / 50-60 HZ
Interfaces	Ranura LAN, USB A, USB B y SD-Card
Control	7" pantalla táctil, resolución 800 x 400 píxeles
Rango de medición: Dureza	3 - 500 N (± 1 N)
Rango de medición: Diámetro / Longitud	2 - 23 mm ($\pm 0,05$ mm) / 2 - 28 mm ($\pm 0,05$ mm)
Gama de medición: Espesor	2 - 10 mm ($\pm 0,05$ mm)
Rango de medición: Peso	20,0 mg - 120 g ($\pm 0,0001$ g)
Rango de medición: Ancho	2 - 15 mm ($\pm 0,05$ mm)
Principio de medición: Velocidad constante	0.05 - 3.0 mm / sec
Principio de medición: Fuerza constante	10 - 100 N / sec
Cumplimiento MC.NET	21 CFR Part 11

MULTICHECK 6

DESCARGAS

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

MULTICHECK 6 →

erweka.com/files/462608/hoja-de-datos-del-producto-multicheck-6.pdf

PHYSICAL TESTERS GUIDE →

erweka.com/files/435505/physical-testers-guide.pdf (inglés)

TABLET TEST EQUIPMENT OVERVIEW →

erweka.com/files/435493/tablet-test-equipment-overview.pdf (inglés)

MULTICHECK 6 →

erweka.com/files/435513/multicheck-6.pdf (inglés)

TABLET HARDNESS TESTERS →

erweka.com/files/435525/tablet-hardness-testers.pdf (inglés)

MULTICHECK 6 ANIMATION →

erweka.com/files/435177/multicheck-6-animation.mp4 (inglés)

MULTICHECK 6

CONTACTO

erweka.com/es/contact-services/contact-form/

PEDIR UN PRESUPUESTO

erweka.com/es/contact-services/contact-form/



ERWEKA
a **VERDER** company

www.erweka.com/es/productos/analizadores-fisicos/durometro-de-comprimidos/multicheck-6/

© ERWEKA – www.erweka.com / Content may be subject to modifications or corrections