



TESTEUR DE DISSOLUTION NUMÉRIQUE

## SÉRIE DT LIGHT


[www.erweka.com/fr/produits/testeur-de-dissolution/usp-1-2-5-6-appareils-individuels/dt-light/](http://www.erweka.com/fr/produits/testeur-de-dissolution/usp-1-2-5-6-appareils-individuels/dt-light/)

## SÉRIE DT LIGHT

# TESTEUR DE DISSOLUTION NUMÉRIQUE

Solidement équipés, compacts et d'une qualité ERWEKA éprouvée : les testeurs de dissolution manuels de la série ERWEKA DT light.

Bien configurés, les appareils ERWEKA light testent dans leur version standard selon la méthode USP 2 (paddle) et sont facilement extensibles aux méthodes 1, 5 et 6 grâce aux accessoires ERWEKA. Les six ou huit stations d'essai sont équipées d'une tête d'entraînement fixe qui permet d'accéder facilement aux récipients d'essai de 1000 ml pour le prélèvement manuel d'échantillons. L'équipement de base comprend également les couvercles pour réduire l'évaporation, les anneaux de centrage pour les tiges ainsi que les balles d'écartement pour régler la hauteur de paddle. Des appareils compacts d'entrée de gamme au meilleur prix.

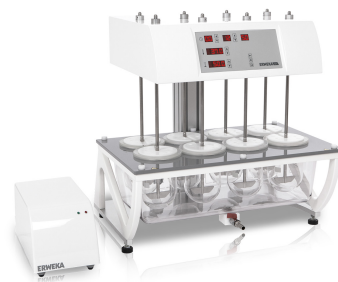

## DT 126 LIGHT

Le parfait appareil d'entrée de gamme parmi les testeurs de dissolution.

- | Dimensions (largeur / profondeur / hauteur) :  
510 mm / 450 mm / 660 mm
- | Poids : 30 kg



## DT 128 LIGHT

Test de dissolution avec jusqu'à 8 stations de test.

- | Tête haute avec 8 stations de test
- | Dimensions (largeur / profondeur / hauteur) :  
510 mm / 450 mm / 660 mm
- | Poids : 30 kg

DÉMARRAGE FACILE DANS LE MONDE DES TESTS DE DISSOLUTION.

## POINTS FORTS DES PRODUITS



### 100 % CONFORME À USP/EP/JP

Le mode « tête haute » permet d'accéder facilement aux récipients d'essai et simplifie ainsi le prélèvement manuel d'échantillons.



### MODE TÊTE HAUTE

Le chauffage de flux externe réduit les vibrations et assure une température constante.



### MÉTHODE 2 USP

Inclus dans la livraison : Tiges avec rames pour la méthode d'essai USP 2.



### NETTOYAGE FACILE

Nettoyage facile du bain-marie et de la surface d'installation.



### CHAUFFAGE EXTERNE

Le mode « tête haute » permet d'accéder facilement aux récipients d'essai et simplifie ainsi le prélèvement manuel d'échantillons.



### UTILISATION FACILE

Utilisation simple avec des touches à symboles et un écran LED pour afficher la température, le nombre de tours par minute et la durée de fonctionnement.

## SÉRIE DT LIGHT

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                             |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Poids                       | 30 kg (DT 126 Light)<br>38 kg (DT128 Light)                           |
| Dimensions (H x W x D)      | 660 x 510 x 450 mm (DT 126 Light)<br>680 x 642 x 482 mm (DT128 Light) |
| Stations de test            | 6 in 2 rows (DT 126 Light)<br>8 in 2 rows (DT 128 Light)              |
| Positions d'échantillonnage | Tête haute                                                            |
| Méthodes USP                | USP 1 / USP 2 / USP 5 / USP 6                                         |
| Température                 | 30 - 50 °C (± 0,2 °C)                                                 |
| Vitesse                     | 20 - 250 rpm                                                          |
| Interfaces                  | 1x RS-232, 2x USB                                                     |

# SÉRIE DT LIGHT

## NOUS CONTACTER →

[erweka.com/fr/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact\\_form.request&product=ER-D-S1-21](http://erweka.com/fr/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=ER-D-S1-21)

## DEMANDE DE DEVIS →

[erweka.com/fr/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact\\_form.quote\\_request&product=ER-D-S1-21](http://erweka.com/fr/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=ER-D-S1-21)

## SÉRIE DT LIGHT PDF →

[erweka.com/files/435519/dt-light-series.pdf](http://erweka.com/files/435519/dt-light-series.pdf)

## FICHE PRODUIT DT LIGHT →

[erweka.com/files/462655/fiche-produit-dt-light.pdf](http://erweka.com/files/462655/fiche-produit-dt-light.pdf)



**ERWEKA**  
a **VERDER** company

[www.erweka.com](http://www.erweka.com)

[www.erweka.com/fr/produits/testeur-de-dissolution/usp-1-2-5-6-appareils-individuels/dt-light/](http://www.erweka.com/fr/produits/testeur-de-dissolution/usp-1-2-5-6-appareils-individuels/dt-light/)