


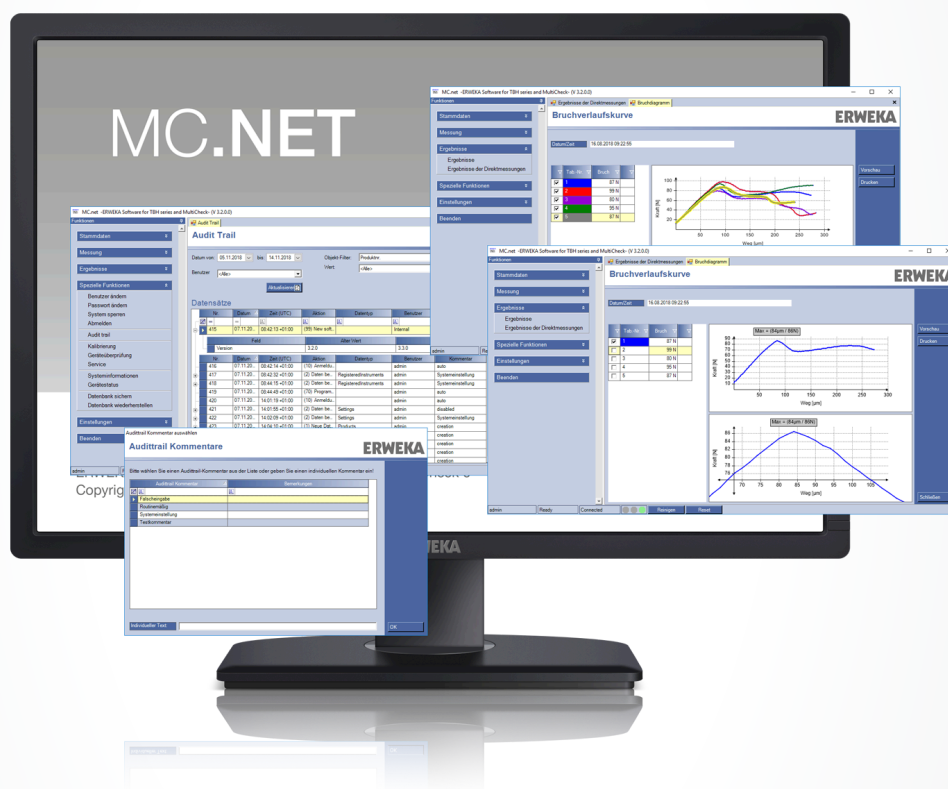

SOFTWARE DE TESTADOR FÍSICO

MC.NET

www.erweka.com/pt/produtos/testadores-fisicos/software-de-testador-fisico/mc-net/

MC.NET

SOFTWARE DE TESTADOR FÍSICO


Um banco de dados, muitos dispositivos: o software MC.NET é a solução inovadora para o controle externo dos testadores de dureza e combinação da ERWEKA.

O software controla todos os dispositivos, desde o compacto TBH 325 e o TBH 425 até os totalmente automatizados EasyCheck e MultiCheck 5/5.1/6.

Com o poder do MC.NET, os dados de vários dispositivos podem ser armazenados em um único banco de dados MS SQL em rede e facilmente acessados por várias instalações do MC.NET na mesma rede. Graças aos recursos avançados da trilha de auditoria, a integridade dos dados é garantida.

Com a ajuda do MC.NET, o usuário pode qualificar facilmente os dispositivos, criar e usar métodos e analisar os resultados dos testes, tudo isso em total conformidade com a norma 21 CFR Part 11 e com uma extensa trilha de auditoria.

Todos os recursos do MC.NET são otimizados em um único aspecto: economizar tempo e manter a documentação completa.

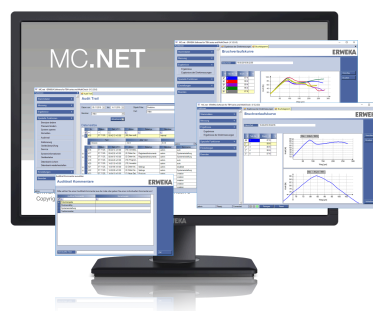

MC.NET

VISÃO GERAL

**100% USP/EP**

Conformidade com todos os regulamentos

**DOCUMENTAÇÃO COMPLETA**

Documentação e rastreamento de todas as atividades

**PESQUISA AVANÇADA E FILTRAGEM**

Funções confortáveis de pesquisa e filtro


MC.NET

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO




CONTROLE TOTAL PARA TODOS OS NOSSOS TESTADORES DE DUREZA

Cada instalação do MC.NET permite o controle total do dispositivo com testes automatizados. Em combinação com um banco de dados de rede que compartilha todos os seus dados em todas as instalações do MC.NET na rede, o MC.NET gerencia métodos, relatórios e rastreia todas as alterações com uma trilha de auditoria completa.

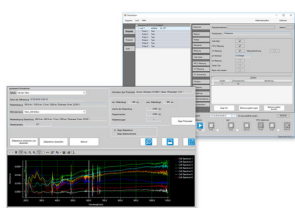

GERENCIAMENTO FLEXÍVEL DE USUÁRIOS

Os usuários podem ser facilmente criados, editados e direitos específicos podem ser rapidamente alocados. Isso garante que somente pessoas autorizadas tenham acesso a funções específicas. O gerenciamento de usuários também funciona em conjunto com o banco de dados de rede, compartilhando usuários em todas as instalações de rede do MC.NET e tem suporte para o Active Directory.

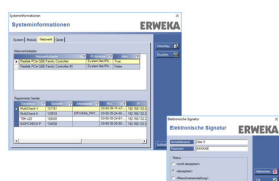

ASSINATURA ELETRÔNICA

Graças à assinatura eletrônica, a aprovação manuscrita dos testes não é mais necessária. Todo o processo, desde a criação, passando pela auditoria, até a aprovação dos resultados dos testes, é totalmente integrado ao software.

GERENCIAMENTO DE DADOS

GERENCIAMENTO CENTRAL DE DADOS

Com o MC.NET, o usuário gerencia todos os dados usados para e pelo testador de dureza, em um banco de dados MS SQL local ou central. Produtos, métodos, usuários e resultados de testes podem ser compartilhados entre vários dispositivos pelo banco de dados central, eliminando a necessidade de manter os mesmos dados repetidamente.

DADOS LOCAIS OU EM REDE

Todos os dados (configurações do dispositivo, informações de lote, métodos e outros) podem ser armazenados localmente ou em um banco de dados de rede (MS SQL). A configuração de rede permite o acesso a todos os dados de qualquer dispositivo alimentado pelo MC.NET, reduzindo, assim, a necessidade de criar dados de base para muitos dispositivos.

GERENCIAMENTO EFICIENTE DE MÉTODOS

Assim que um método é criado com todas as suas informações, ele pode ser facilmente usado como modelo para métodos futuros. Basta selecionar o modelo adequado e usá-lo. Dessa forma, a criação de um número maior de métodos é eficiente e confortável.

MC.NET

ANÁLISE E AUDITORIA



TRILHA DE AUDITORIA DO MC.NET COM TOTAL INTEGRIDADE DE DADOS

A trilha de auditoria dentro do MC.NET está em conformidade com as normas regulamentares (por exemplo, a 21 CFR Part 11) e rastreia todas as atividades do software, registrando a alteração, o usuário, a hora e o motivo (opcional) ("o que, quem, quando, por que"). Para concluir rapidamente a caixa de diálogo da trilha de auditoria, os motivos podem ser predefinidos e, em seguida, selecionados ou inseridos a seu critério. Com o Audit Trail Viewer, os usuários podem pesquisar e filtrar de forma rápida e conveniente todas as alterações no sistema, sem nunca perder a visão geral.



DIAGRAMA DE DUREZA DO MC.NET

O diagrama de dureza opcional mostra o progresso do caminho de força da dureza do comprimido, permitindo uma fácil confirmação visual da medição da dureza do comprimido. Os resultados gráficos do diagrama de dureza ajudam na derivação de um método, bem como na seleção dos parâmetros de teste. A função também serve como recurso de controle de qualidade, pois os resultados esperados podem ser facilmente comparados com o diagrama real. Após a conclusão dos testes, até 20 diagramas de dureza podem ser comparados entre si. A função de zoom e as diferentes cores dos diagramas selecionados tornam a classificação dos resultados mais fácil do que nunca. Os diagramas de dureza podem ser salvos e impressos. Pontos de dados individuais podem ser exportados como arquivo XML.

FLUXO DE TRABALHO

TRILHA DE AUDITORIA DO MC.NET

Com a trilha de auditoria (e seu registro de "o que, quem, quando e por que"), o rastreamento de alterações em todos os dispositivos é o mais fácil possível. O Audit Trail Viewer simplifica a filtragem e a pesquisa com uma interface fácil de usar. Ele está 100% em conformidade com a norma 21 CFR Part 11 e oferece integridade total dos dados.

TBH PARA MULTICHECK 6

Com o MC.NET, os usuários obtêm controle total sobre o testador de dureza física da ERWEKA por um computador externo. O software é compatível com todos os dispositivos, desde o TBH 325 manual, passando pelo TBH 425 semiautomático, até o EasyCheck e o MultiCheck 5/5.1/6 totalmente automatizados. Com sua interface fácil de usar, novos métodos podem ser criados rapidamente e os testes podem ser iniciados e posteriormente analisados em pouco tempo. Isso faz do MC.NET o companheiro perfeito para o nosso testador físico.

MC.NET

CONTATO →

www.erweka.com/pt/contact-services/contact-form/?

[prefilltext=contact_form.request&product=ER-P-SO-11](#)

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO →

www.erweka.com/pt/contact-services/contact-form/?

[prefilltext=contact_form.quote_request&product=ER-P-SO-11](#)

DOWNLOADS

MC.NET →

www.erweka.com/files/435527/mc-net.pdf · Inglês

PHYSICAL TESTERS GUIDE →


www.erweka.com/files/435505/physical-testers-guide.pdf · Inglês

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO MC.NET →

www.erweka.com/files/462678/ficha-tecnica-do-produto-mc-net.pdf · Português

TABLET HARDNESS TESTERS →

www.erweka.com/files/435525/tablet-hardness-testers.pdf · Inglês

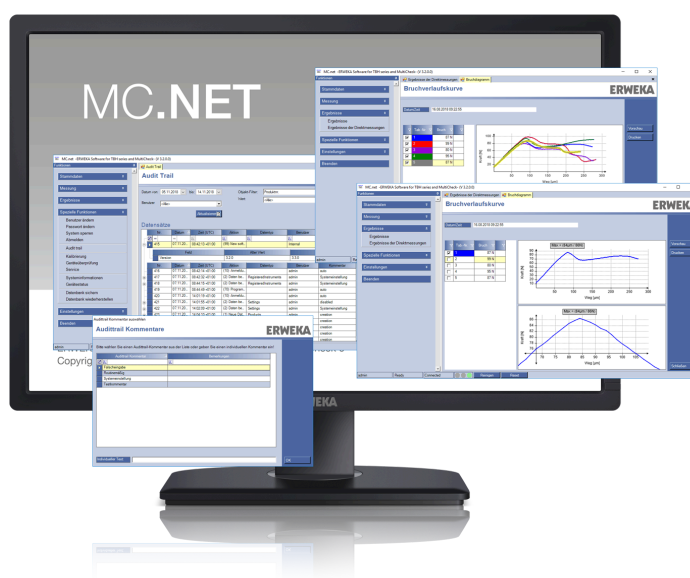

ERWEKA

a **VERDER** company

www.erweka.com/pt/produtos/testadores-fisicos/software-de-testador-fisico/mc-net/

© ERWEKA – www.erweka.com / Conteúdo sujeito a modificações ou correções