



压片机

EP-1

www.erweka.com/cn/products/r-d-equipment/tablet-press/ep-1/

EP-1

压片机

EP-1 是 R&D 用途.

单冲偏心压片机 EP-1 可以生产直径达 20 毫米的片剂和异形产品。它自动运行，即模具中填充粉末或颗粒，压缩材料并连续弹出片剂。高达 3 吨的压缩力和高达 17 毫米的填充深度易于调整。

所有组件要么覆盖硬铬，要么由不锈钢 AISI 304 或前门亚克力玻璃制成。框架部件（板）由 1.0332 StW22 制成，并镀有光亮的镀铬。吞吐量最大为每小时 4.000 片。



EP-1

性能指标


- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 压机速度无级可调 | 最大片剂产量 4.000 片/小时 |
| 最大填充深度 17 mm | 净重 135 kg |
| 最大填充深度 17 mm | 带附件的尺寸 503/408/797 毫米（长/宽/高） |
| 最大压力 3 t | 电源 240V -15%+10%/50-60Hz |
| 压力机尺寸 425/385/695 mm（长/宽/高） | 电气负载 2.2 kVA |

EP-1

选项

根据您的需求配置

- | EP-1 单冲压片机
- | 不锈钢支撑台
- | 单冲头和冲模，直径 4.0 mm 至 20.0 mm，STR 1 型，用于圆形片剂

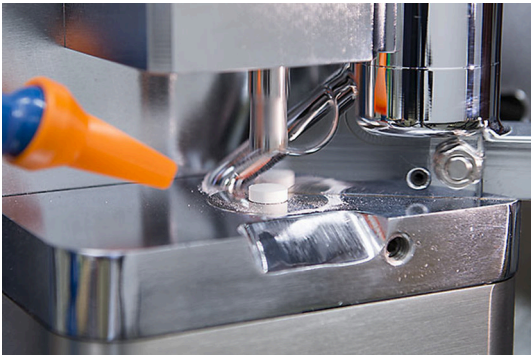

EP-1

技术参数

重量	135公斤
Dimensions (H x W x D)	695 x 385 x 425 mm
带附件零件的尺寸(高x宽x深)	797 x 408 x 503 mm
电压	200 - 240 V -15% +10% / 50-60 Hz
电压	2.2 kVA
保护等级	I/EN 61140
保护类型	IP 21/IEC 529
印刷速度	无限可变
最大平板电脑输出	4000 tablets/hour
最大药片直径	20毫米
最大填充深度	17毫米
最大压缩力	3 t
运行过程中环境温度	+10°C至+30°C(环境温度比测试温度低至少5°C)
储存和运输温度	+5 °C up to +40 °C
相对空气湿度	25 to 80 % non-condensing

压片机

EP-1

联系我们

www.erweka.com/cn/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=ER-R-TP-01

报价详情

www.erweka.com/cn/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=ER-R-TP-01

产品数据表 →

www.erweka.com/files/462681/chan-pin-shu-ju-biaoep-1.pdf

观看视频 →

www.erweka.com/files/477714/erweka-ep-1-tablet-press.mp4



ERWEKA
a **VERDER** company

www.erweka.com/cn/products/r-d-equipment/tablet-press/ep-1/