



SOFTWARE DO TESTADOR DE DISSOLUÇÃO

DISSO.NET 4

www.erweka.com/pt/produtos/testadores-de-dissolucao/software-do-testador-de-dissolucao/disso-net-4/

DISSO.NET 4

SOFTWARE DO TESTADOR DE DISSOLUÇÃO

O Disso.NET 4 da ERWEKA é o companheiro perfeito, em conformidade com a norma 21 CFR Part 11, para todos os nossos sistemas de dissolução – desde sistemas de dissolução off-line, passando por sistemas on-line para on/off-line, até o sistema RoboDis II+ totalmente automatizado.

O software ajuda com trabalhos de dissolução padrão, lida facilmente com tarefas de qualificação e fornece controle sobre cada função individual e dispositivos conectados (por exemplo, testador de dissolução com espectrofotômetro UV-Vis). Depois de concluir esses testes, o Disso.NET cria relatórios abrangentes com logotipos corporativos para exportação de arquivos PDF ou exporta seus resultados em XLS ou XML.

A extensa trilha de auditoria, de acordo com a norma 21 CFR Part 11 mais recente, documenta minuciosamente todas as alterações feitas no sistema (“o que, quem, quando e por que”) e pode ser facilmente pesquisada e filtrada pelo Audit Trail Viewer.

O Disso.NET 4 tem uma conexão de diretório ativo. Isso permite dados de login e senhas de usuário entre sistemas, evitando assim inúmeras senhas e garantindo fácil manuseio.



DISSO.NET 4

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



FÁCIL GERENCIAMENTO DE DADOS

Usuários, métodos, relatórios e muito mais podem ser facilmente gerenciados com o Disso.NET 4. O suporte a vários usuários com diferentes funções configuráveis (ou seja, operador, operador sênior, administrador) permite um controle de acesso preciso ao sistema e aos dados e pode ser ajustado ainda mais com permissões individuais. O logoff automático completa os recursos de segurança de acesso e garante que somente o pessoal aprovado tenha acesso.

DOCUMENTAÇÃO E RELATÓRIOS

O Disso.NET 4 documenta totalmente os testes: com o clique de um botão, os clientes podem criar facilmente relatórios com logotipos personalizados – desde relatórios de análise compactos até dados de métodos, dados de calibração ou dados brutos. O fluxo de trabalho integrado permite fácil aprovação e revisão antes da publicação de relatórios para o laboratório eletrônico.

SUPORTE A IDIOMAS

O suporte a idiomas como inglês e alemão já está incorporado ao software de teste de dissolução Disso.NET 4. Mais idiomas podem ser facilmente adicionados a partir dos arquivos de idiomas.

BANCO DE DADOS COM BACKUP E RESTAURAÇÃO

Nosso banco de dados MS SQL confiável e comprovado pelo setor armazena facilmente todos os seus dados – de métodos a usuários, dados de medição UV-Vis, relatórios e dados brutos. Além disso, as funções de backup e restauração do MS SQL, fáceis de usar, garantem maior integridade e evitam a perda de dados.


ADEQUAÇÃO DO SISTEMA E MULTITAREFA

Os testes constantes de adequação do sistema garantem a mais alta confiabilidade mediante verificação constante do sistema. O princípio do JobController permite uma multitarefa fácil durante o teste.

DOS NOSSOS TESTADORES DE DISSOLUÇÃO AO ROBODIS II


CONTROLE TOTAL DE TODOS OS NOSSOS SISTEMAS

O Disso.NET 4 permite o controle de todos os nossos sistemas de dissolução. Os sistemas on-line de dissolução mais simples, a dissolução on/off-line complexa com sistemas HPLC e o complexo RoboDis II+ podem ser controlados pelo Disso.NET 4, reduzindo a complexidade do dispositivo e do sistema a algumas telas intuitivas com uma abordagem lógica de cima para baixo.

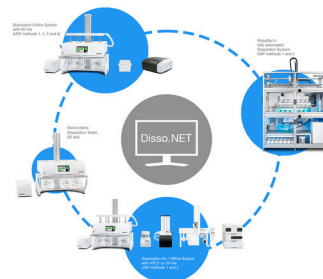

CONFORMIDADE COM 21 CFR PART 11

TRILHA DE AUDITORIA

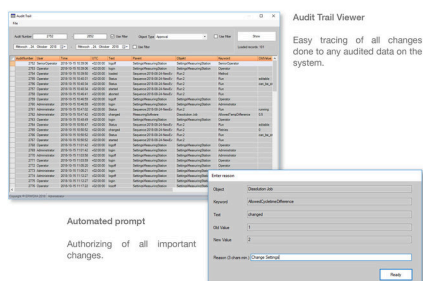

O Disso.NET 4 apresenta uma trilha de auditoria abrangente, que rastreia todas as alterações feitas no sistema ("o que, quem, quando e por que"). Sempre que um usuário autorizado fizer alterações em qualquer dado do sistema que precise ser rastreado, um prompt da trilha de auditoria será exibido e forçará o usuário a inserir um motivo para essa alteração. Sempre que os dados são criados a partir do zero (por exemplo, um novo método), o sistema avalia automaticamente essa entrada de auditoria e adiciona automaticamente um motivo (por exemplo, "criação").


Todos os dados de auditoria podem ser pesquisados e filtrados confortavelmente usando o novo Audi Trail Viewer, que permite o rastreamento fácil de qualquer alteração no sistema com um número de auditoria consecutivo. Esse recurso está 100% em conformidade com as normas regulamentares mais recentes.

MÓDULOS PODEROSOS

EDITOR DISSO.NET

O Disso.NET 4 apresenta uma trilha de auditoria abrangente, que rastreia todas as alterações feitas no sistema ("o que, quem, quando e por que"). Sempre que um usuário autorizado fizer alterações em qualquer dado do sistema que precise ser rastreado, um prompt da trilha de auditoria será exibido e forçará o usuário a inserir um motivo para essa alteração. Sempre que os dados são criados a partir do zero (por exemplo, um novo método), o sistema avalia automaticamente essa entrada de auditoria e adiciona automaticamente um motivo (por exemplo, "criação").

Todos os dados de auditoria podem ser pesquisados e filtrados confortavelmente usando o novo Audi Trail Viewer, que permite o rastreamento fácil de qualquer alteração no sistema com um número de auditoria consecutivo. Esse recurso está 100% em conformidade com as normas regulamentares mais recentes.

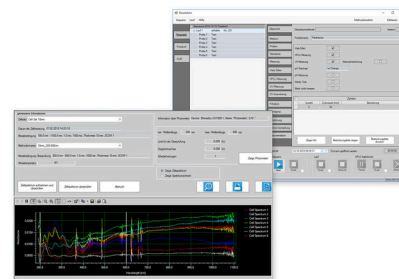

DISSO.NET 4

DOWNLOADS

DISSO.NET 4 → www.erweka.com/files/435528/disso-net-4.pdf (inglês)

DISSOLUTION GUIDE → www.erweka.com/files/435533/dissolution-guide.pdf (inglês)

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO → www.erweka.com/files/462684/ficha-tecnica-do-produto-dissonet-4.pdf (português)

TABLET TEST EQUIPMENT OVERVIEW → www.erweka.com/files/435493/tablet-test-equipment-overview.pdf (inglês)

ERWEKA DISSOLUTION SYSTEM WITH HPLC (ANIMATION) → www.erweka.com/files/461854/erweka-dissolution-system-with-hplc-animation.mp4 (inglês)

DISSO.NET 4

CONTATO

www.erweka.com/pt/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=ER-D-SO-01

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

www.erweka.com/pt/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=ER-D-SO-01



ERWEKA
a **VERDER** company

www.erweka.com/pt/produtos/testadores-de-dissolucao/software-do-testador-de-dissolucao/disso-net-4/

© ERWEKA GmbH – www.erweka.com / O conteúdo pode estar sujeito a modificações ou correções