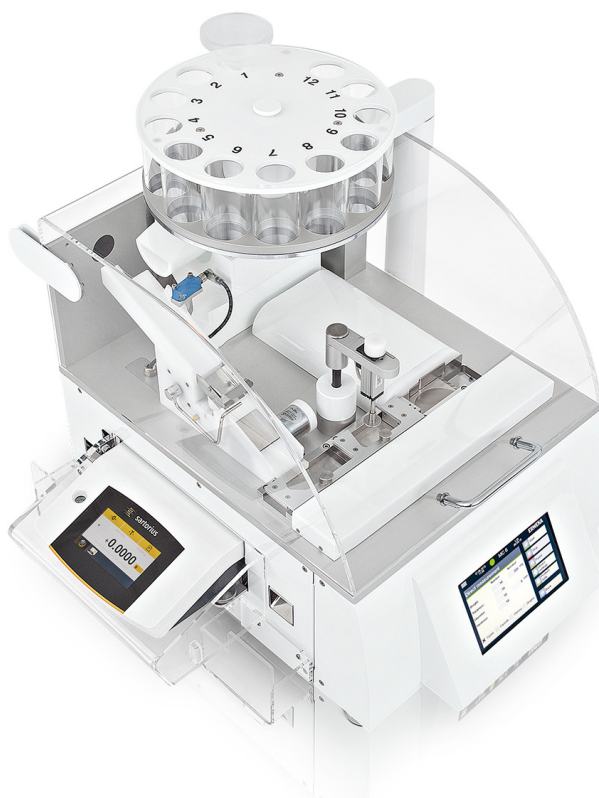




TESTADOR DE DUREZA DE COMPRIMIDOS

MULTICHECK 6

www.erweka.com/pt/produtos/testadores-fisicos/testadores-de-dureza-de-comprimidos/multicheck-6/

MULTICHECK 6

TESTADOR DE DUREZA DE COMPRIMIDOS

O MultiCheck 6 combina maior conveniência para o usuário e máxima eficiência.

Este testador de combinação totalmente automático é repleto de tecnologia inovadora: uma tela sensível ao toque intuitiva com funcionalidade de software MC.NET integrada, um sistema de medição de peso de cápsulas e um Oblong Navigator® patenteado são apenas alguns dos muitos recursos inovadores. Além disso, o MultiCheck 6 oferece um nível de ruído baixo insuperável e a operação mais limpa da sua categoria.



Os recursos comprovados foram mantidos: o MultiCheck 6 pode testar até cinco parâmetros de comprimidos, é totalmente automatizado e 100% compatível com todas as farmacopeias do mundo, o que o faz ser muito versátil.



Medição do peso da cápsula



Tela tátil integrada



Oblong Navigator®

A PRÓXIMA GERAÇÃO DO MULTICHECK

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

MEDIÇÃO DO PESO DA CÁPSULA

Com seu sistema de medição do peso da cápsula vazia, o MultiCheck 6 é capaz de determinar o peso da cápsula e deduzir automaticamente o peso da cápsula vazia do peso das cápsulas cheias. A ejeção direta imediatamente após a medição do peso acelera o processo de medição.

TELA TÁTIL

A tela sensível ao toque intuitiva facilita a operação do dispositivo.

OBLONG NAVIGATOR®

Com a tecnologia patenteada de plataforma giratória, oblongos e comprimidos de formato irregular podem ser corretamente alinhados e facilmente verificados no que diz respeito a diâmetro, largura e comprimento.

MEDIÇÃO DIRETA

O menu de medição direta permite que os testes sejam iniciados rapidamente e que os resultados sejam salvos imediatamente.

MULTICHECK 6

TELA TÁTIL MULTICHECK 6

FÁCIL DE USAR – RECURSOS ABRANGENTES

Ao desenvolver a tela sensível ao toque do MultiCheck 6, pensamos nas funções mais úteis para o usuário: criação simples e rápida dos métodos, inicialização de testes e documentação dos resultados. A tela sensível ao toque é intuitiva e facilita a operação dos recursos disponíveis. Graças às funções integradas do software MC.NET, as medições podem ser iniciadas e os resultados são exibidos diretamente no dispositivo.



ARMAZENAMENTO DO RESULTADO DO TESTE

O dispositivo armazena 100 produtos/métodos como padrão e tem uma memória de produto que pode armazenar até 1 milhão de resultados de testes, permitindo que os resultados anteriores podem ser recuperados a qualquer momento.

Além disso, as amplas funções de calibração integradas e o recurso Audit Trail Light (registro de “o que, quem e quando”) garantem que você sempre tenha acesso a resultados de testes precisos e à extensa documentação de todas as etapas de trabalho – máxima facilidade de uso combinada com uma funcionalidade poderosa.

MULTICHECK 6

TESTE DE ATÉ 5 PARÂMETROS PARA TODOS OS TIPOS DE COMPRIMIDOS

PESO

ESPESSURA

DIÂMETRO/COMPRIMENTO

LARGURA

TESTE DE
DUREZA

FERRAMENTA DE CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA

AUTOCAL 2.0

O sistema AutoCal 2.0 da ERWEKA é uma ferramenta de calibração para a calibração automática da estação do testador de dureza – sem pesos, PC externo e software.

A calibração nunca foi tão fácil: o pen drive USB AutoCal 2.0 é conectado à porta USB do TBH x25 e a célula de carga certificada conectada é inserida na estação de teste de dureza.

Todo o sistema (ajuste e calibração) é realizado mediante o teclado e a tela do testador de dureza. O dispositivo realiza o ajuste automaticamente e a calibração pode ser verificada no que diz respeito à linearidade, verificando até três pontos dentro da faixa de medição. Além disso, um relatório pode ser criado mediante a interface de impressora padrão.



MULTICHECK 6

DADOS TÉCNICOS

Peso	50 kg
Dimensions (H x W x D)	613 x 627 x 643 mm
Voltage	100 - 240 V / 50-60 HZ
Interfaces	LAN, USB A, USB B e slot para cartão SD
Controle	7" touch display, resolução 800 x 400 pixels
Intervalo de medição: Hardness	3 - 500 N (± 1 N)
Intervalo de medição: Diâmetro / comprimento	2 - 23 mm ($\pm 0,05$ mm) / 2 - 28 mm ($\pm 0,05$ mm)
Intervalo de medição: espessura	2 - 10 mm ($\pm 0,05$ mm)
Intervalo de medição: Peso	20,0 mg - 120 g ($\pm 0,0001$ g)
Intervalo de medição: Largura	2 - 15 mm ($\pm 0,05$ mm)
Princípio da medição: velocidade constante	0.05 - 3.0 mm / sec
Princípio da medição: força constante	10 - 100 N / sec
Compliance MC.NET	21 CFR Part 11

MULTICHECK 6

DOWNLOADS

MULTICHECK 6 — INGLÊS →

erweka.com/files/435513/multicheck-6.pdf

PHYSICAL TESTERS GUIDE — INGLÊS →

erweka.com/files/435505/physical-testers-guide.pdf

TABLET TEST EQUIPMENT OVERVIEW — INGLÊS →

erweka.com/files/435493/tablet-test-equipment-overview.pdf

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO —

PORTUGUÊS →

erweka.com/files/462690/ficha-tecnica-do-produto-multicheck-6.pdf

TABLET HARDNESS TESTERS — INGLÊS →

erweka.com/files/435525/tablet-hardness-testers.pdf

MULTICHECK 6 ANIMATION — INGLÊS →

erweka.com/files/435177/multicheck-6-animation.mp4

MULTICHECK 6

CONTATO

erweka.com/pt/contact-services/contact-form/

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

erweka.com/pt/contact-services/contact-form/



ERWEKA
a **VERDER** company

www.erweka.com/pt/produtos/testadores-fisicos/testadores-de-dureza-de-comprimidos/multichex-6/

© ERWEKA – www.erweka.com / Content may be subject to modifications or corrections